


Nummer: 284-ADT
Revision: 00
Seitenanzahl: 3

W&H Adapterset für Thermodesinfektoren (Reinigungs- und Desinfektionsgeräte)



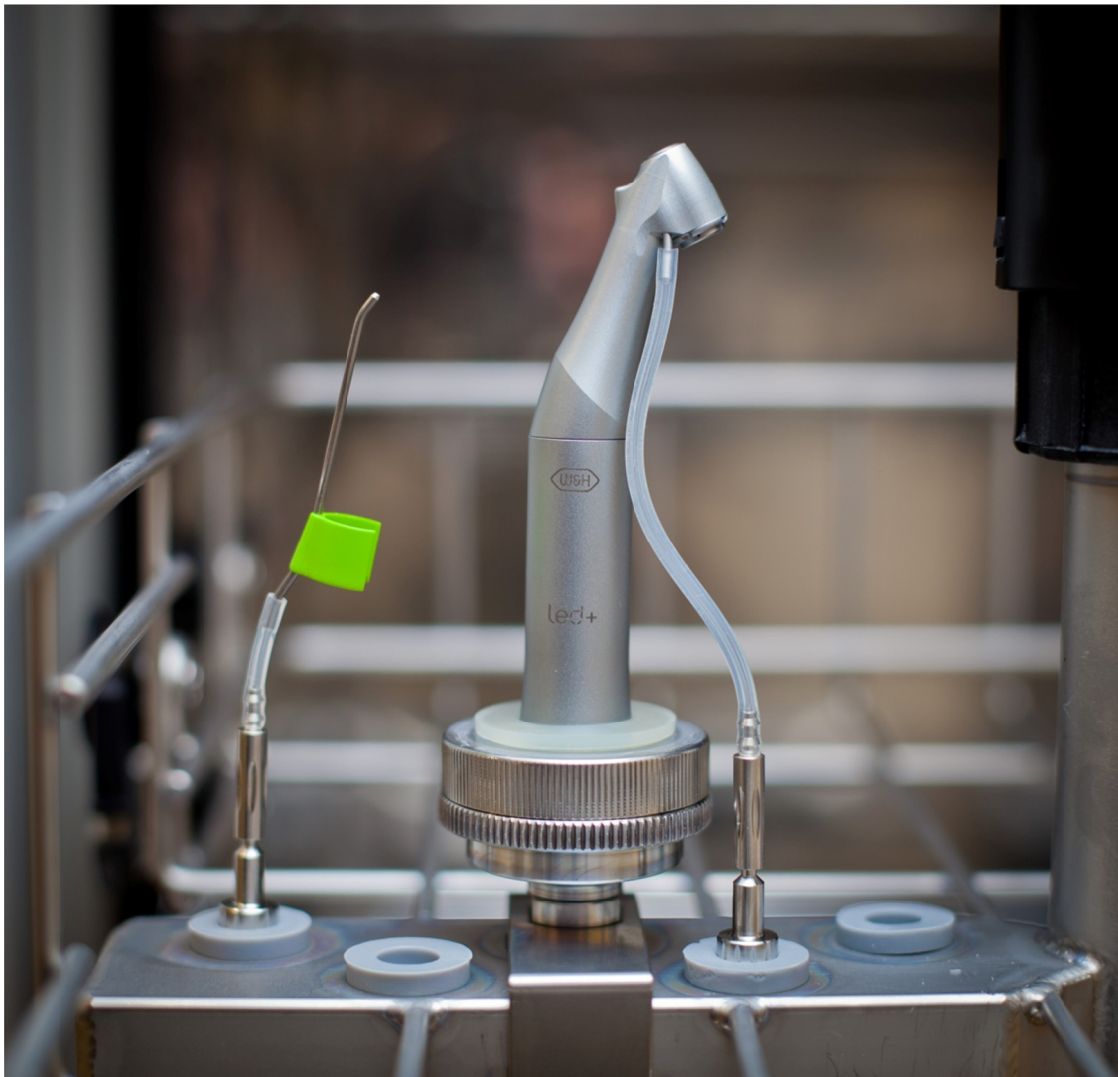


W&H Adapterset für Thermodesinfektoren

Produkt

Das neue W&H Adapterset ist speziell für die maschinelle Aufbereitung von Zubehör/Kleinteilen wie z. B. Scalerspitzen oder auch Instrumente mit entsprechendem Lumen wie z. B. Kühlmittelrohre in Thermodesinfektoren (RDG's) entwickelt worden. Anwenderfreundlich ermöglicht das Adapterset jetzt eine unkomplizierte, validierte, maschinelle Aufbereitung der Kleinteile.

Die Anwendung ist ganz einfach: Den entsprechenden Adapter auf die Standardaufsätze (8 mm) in der Spülleiste des Thermodesinfektors aufschrauben bzw. aufstecken und das jeweilige Produkt zur Reinigung /Desinfektion aufsetzen.

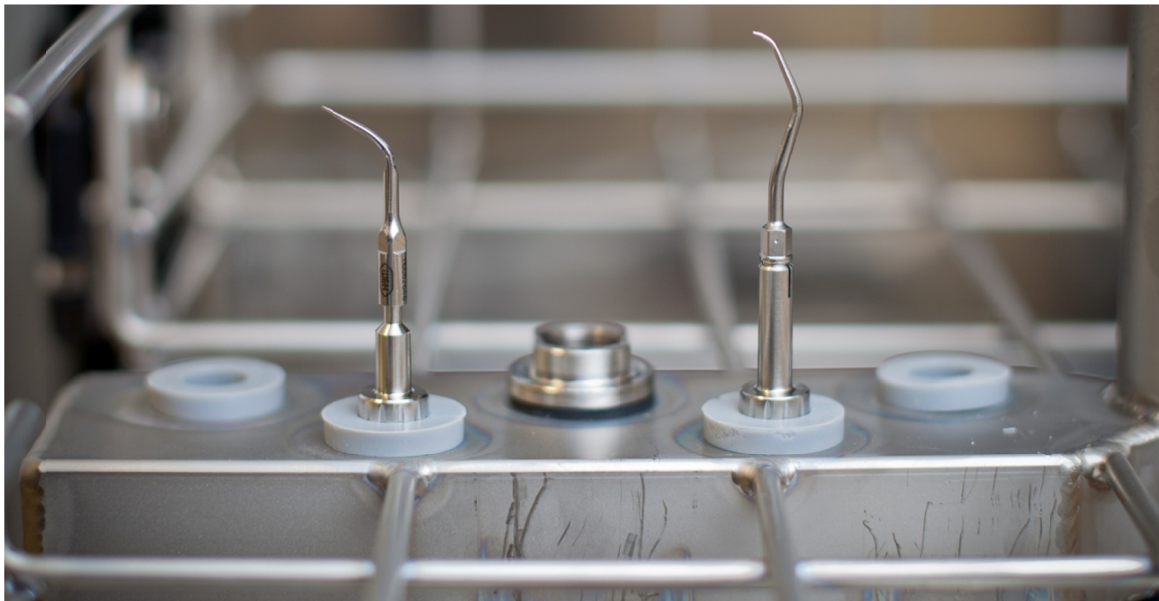

Vorteile

- > Unterstützt die validierbare Innenreinigung & Desinfektion der Lumenbereiche von schwer zugängigen Zubehör/Kleinteilen (oft bei Begehungen beanstandet)
- > Anwenderfreundliche einfache Handhabung
- > Hervorragendes PreisLeistungsverhältnis
- > Die Adapter für die Scalerspitzen wurden so entwickelt, dass sowohl das Innen- wie Außengewinde ideal gereinigt und gespült werden.
- > W&H Lösung auch für andere Hersteller geeignet
Kompatibel mit den gängigen Thermodesinfektoren am Markt



W&H Adapterset für Thermodesinfektoren



Verkauf

Sortiment

Ein W&H Adapterset (REF 0723350) besteht aus:



- 3 Stück Adapter (REF: 06894700)
für Scalerspitzen (Air Scaler)



- 3 Stück Adapter (REF 06895000)
für Piezo- und Prophylaxspitzen



- 3 Stück Adapter (REF 07149200)
Zwischenadapter



- 10 Stück Schläuche (REF 01525000)

Type	REF	Lieferumfang	Empfohlener Verkaufspreis EUR / Stück	Lieferbar
Adapterset für RDG	07233500	1 Set (siehe oben)	220,-	sofort
Adapter Scalerspitzen (Airscaler)	06894700	3 Stück	85,-	sofort
Adapter Scalerspitzen (Piezo + Prophylaxspitzen)	06895000	3 Stück	85,-	sofort
Zwischenadapter	07149200	3 Stück	70,-	sofort
Schläuche	01525000	10 Stück Schläuche	40,-	sofort