



**bioscientia**

Entwickelt in Zusammenarbeit mit dem Hygieneinstitut der Bioscientia Deutschland



**product design award**

2007

## Baisch.Hygenius MK2. Das Hygienesystem für Seife und Desinfektion

**Ein professionelles Hygienekonzept ist für jede Zahnarzt- bzw. Arztpraxis unabdingbar, um Patienten, Praxismitarbeiter und Ärzte zu schützen.** Schließlich zählen Hände, Atemwege sowie Schleimhäute zu den Hauptübertragungsstellen wegen von Infektionskrankheiten. Zusätzlich hat der Gesetzgeber die Rahmenbedingungen für die Hygiene in Zahnarzt- bzw. Arztpraxen deutlich verschärft

Unter anderem schreiben die neuen **Hygienerichtlinien des Robert Koch Institutes** seit April 2006 vor, dass Spender für Seife und Desinfektionsmittel in den Behandlungsräumen nur noch „**ohne Handberührung**“ betätigt werden dürfen. Die bisher branchenweit üblichen Pumpspender in der Arbeitsplatte sind damit nicht mehr zulässig

### Baisch.Hygenius MK2 trägt den neuen Anforderungen Rechnung

Ausgestattet mit einem Infrarot-Sensor sorgt er nicht nur für die berührungsfreie Dosierung von Seife und Desinfektionsmittel. Auch die Reinigung des Spenders gestaltet sich absolut einfach – ohne aufwändige Sterilisation.

Durch das Verwenden von Einwegpumpen entfällt die vorgeschriebene Reinigung und Desinfektion jener Teile, durch die Seife oder Desinfektionslösung fließen. So sparen Sie kostbare Zeit!

### Überzeugen Sie sich selbst von den vielen Vorteilen:

- Berührungslose Bedienung über einen Infrarot-Sensor
- Netz- oder Batteriebetrieb möglich

- Netzanschluss empfehlenswert
- Netzunabhängiger Batteriebetrieb mit einer Standzeit von ca. 6 Monaten (je nach Batterietyp)
- Hygienisches Einwegsystem mit formschöner 500-ml Flasche und integrierter Einwegpumpe
- Kein Sterilisationsaufwand, da Flasche und Pumpe nach Gebrauch entsorgt werden
- Übliche Flächendesinfektion ist für den Hygenius absolut ausreichend

## Gutes Design verbindet Form und Funktion




Mit seinem klaren Design und der hochwertigen Verchromung, integriert sich der Baisch.Hygenius MK2 harmonisch in das Ambiente Ihres Behandlungszimmers.

Die Tischausführung lässt sich schnell und einfach nachrüsten, denn sie passt auf die Durchgangsbohrungen aller herkömmlichen Spender, unabhängig vom Hersteller.

## Schnell und einfach ausgetauscht



1 Deckel der Einwegflasche für Seife bzw. Desinfektionsmittel lösen und die mitgelieferte Einwegpumpe einführen

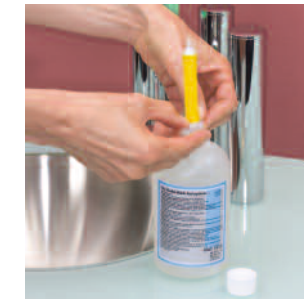

2 Einwegpumpe aufsetzen, leeren Behälter und gebrauchte Pumpe entsorgen



3 Einwegflasche mit Pumpe „Kopf voran“ in den Hygenius einführen – 1/2 Drehbewegung nach rechts – fertig

## Batteriewechsel



1 Kappe abnehmen



2 Neue Batterie anschließen

## Produktvarianten und Nachfüllprodukte



### Tischspender

Die praktische Lösung für die Arbeitsplatte  
Art.-Nr. MK2AP



### Wandspender

Die formschöne Hygienelösung für die Wand  
Art.-Nr. MK2WA



### Mobiler Spender

Hygiene, wo immer Sie sie benötigen  
Art.-Nr. MK2TS



### 1 Hände-Waschlotion

Hautfreundliche Waschlotion zum häufigen Händewaschen  
(Hersteller: Antiseptica GmbH)  
Art.-Nr. MK2SEIFE (500 ml)

### 2 Poly-Alcohol

Alkoholisches Einreibepreparat für die hygienische und chirurgische Händedesinfektion  
(Hersteller: Antiseptica GmbH)  
Art.-Nr. MK2DESINF (500 ml)

Alle von Baisch angebotenen Seifen und Händedesinfektionsmittel entsprechen den einschlägigen Normen (z.B. DIN EN ISO 9001 und 13 485), sind geprüft nach DGHM-Richtlinien und besitzen die vom Gesetzgeber vorgeschriebenen Zulassungen



product  
design  
award


2007

**Baisch.Hygenius MK2**  
Die berührungsfreie Hygienegarantie

**Karl  
Baisch**  
GMBH  
Quality made in Germany

Einrichtungen für Ärzte,  
Zahnärzte und Krankenhäuser

Lagerhausstraße 17a  
94447 Plattling  
Telefon +49 (0) 9931 89007-0  
Telefax +49 (0) 9931 89007-29  
info@baisch.de · www.baisch.de

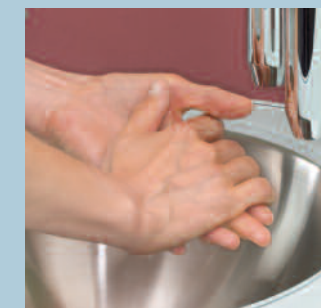

**Karl  
Baisch**  
GMBH  
Quality made in Germany