

tempofit®

Provisorisches Kronen- und Brückenmaterial (2:1), selbsthärtend



■ **tempofit®** das **Komplett-System** für hochästhetische Kronen- und Brückenprovisorien mit aufeinander abgestimmten System-Komponenten.

■ **Natürliche Ästhetik** durch langzeit-farbstabile Pigmente, hochglanzpolierbar, farblich individuell charakterisierbar, kompatibel mit lichthärtenden Composites.

■ Provisorien aus **tempofit®** zeichnen sich durch hohe **funktionelle** Belastbarkeit aus und sind besonders druck- und abrasionsfest.

■ Höchste **okklusale Passgenauigkeit** und Spannungsfreiheit, auch bei mehrgliedrigen Konstruktionen, durch minimale Polymerisationsschrumpfung.

■ **Keine Irritationen** von Pulpa und Gingiva durch minimale Polymerisationstemperatur, geschmacksneutral und biokompatibel.



Komplett-System mit
Reparatur-Set und Automix2




Das Komplett-System für hochästhetische Kronen- und Brückenprovisorien in der 2:1 Kartusche, Automix2



- Höchste okklusale Passgenauigkeit und Spannungsfreiheit, auch bei mehrgliedrigen Konstruktionen, durch minimale Polymerisationsschrumpfung.

Anwenderfreundlich

- Einfache Handhabung, fehlerfreies Mischen und Dosieren, geringer Materialverbrauch.
- Durch die kurze Mundverweildauer (ca. 2 Min.) lässt sich das Provisorium frühzeitig entnehmen, mühelos beschneiden (mit Schere oder Skalpell) und ohne Zeitverzögerung beschleifen und hochglanzpolieren.

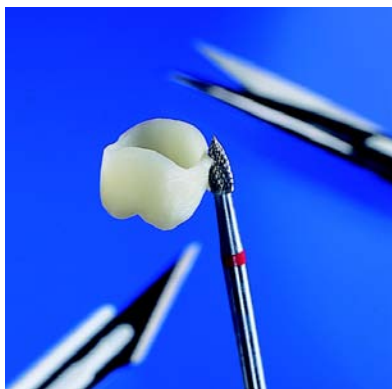

Natürliche Ästhetik

- **tempofit®** ist hochglanzpolierbar und bewahrt selbst bei längerer Tragedauer seine ursprüngliche Farbbrillanz. Es sind 3 Grundfarben (A1, A2, A3,5) erhältlich, die sich in besonders anspruchsvollen Fällen mit allen handelsüblichen Composites farblich individuell charakterisieren lassen.

- Ideal für Einzel- und mehrgliedrige Kurz- und Langzeitprovisorien durch hohe Flexibilität (niedriger Biegemodul).

Patientenfreundlich

- Keine Irritationen von Pulpa und Gingiva durch minimale Polymerisationstemperatur, geschmacksneutral und biokompatibel.
- Provisorien aus **tempofit®** zeichnen sich durch hohe funktionelle Belastbarkeit aus und sind besonders druck- und abrasionsfest.



Systemvorteil durch abgestimmte Material-Komponenten und Automix2-System



Systemvorteil

- **tempofit®** in der neuen 2:1 Kartusche (85 g Inhalt!) bietet neben dem Materialvorteil auch einen klaren Systemvorteil durch abgestimmte Materialkomponenten, Reparatur-Set und Automix2-System.



- Durch die ideale Konsistenz ist **smartrepair®** intra- und extraoral zu verarbeiten, ohne zu tropfen.
- **smartrepair®** ist in den gleichen Farben wie **tempofit®** erhältlich und, wie auch **smartbond®**, perfekt auf **tempofit®** abgestimmt.

Reparaturset

- **smartrepair®** in neuartigen Applikationspritzen, mit austauschbaren Applikationsnadeln läßt sich punktgenau applizieren. Selbst komplizierte Reparaturen, Ergänzungen von Kronenrändern und anatomische Konturierungen lassen sich schnell und präzise durchführen. **smartrepair®** ist lichthärtend und spart so doppelt: Zeit und Material.

- **smartbond®** – one step bonding – wird in nur einem Arbeitsschritt mit den smartbrushes gezielt und sparsam auf die Reparaturstelle aufgetragen und kann zeitgleich, zusammen mit **smartrepair®**, lichtpolymerisiert werden.

2:1 = 1:1 Zukunftsformel für Kartuschen-Systeme

- Die neue Standardpistole ist so ausgelegt, daß sie sich für **tempofit®** 2:1 Kartuschen genauso eignet wie für die üblichen 1:1 Kartuschen.
- Eine zusätzliche Pistole, wie bei anderen Kronen- und Brückenmaterialien in 4:1 oder 10:1 Kartuschen, ist nicht mehr erforderlich.

Das neue Automix2-Dispenser-System

- Verhindert Kreuzkontamination, spart Material und läßt sich leichter aus der Kartusche ausbringen. Der Sicherheitsabstand zwischen den Austrittsöffnungen verhindert eine Blockierung.

