

# Futurabond® DC

DAS DUALHÄRTENDE SELF-ETCH-BOND  
MIT NANOFÜLLERN VERSTÄRKT

# Futurabond® DC

**DUAL. UNIVERSAL. SICHER.**

## Ein Bond für alle Fälle

Futurabond DC ist das ideale selbststärkende Bonding zur Anwendung unter allen licht-, selbst-, oder dualhärtenden Füllungsmaterialien für einen starken, dauerhaften Verbund.

Ob Compositefüllungen, Inlays, Onlays, Kronen, Brücken oder Wurzelstifte, Futurabond DC erfüllt die Anforderungen an eine patientengerechte Therapie verschiedenster Indikationen. Haftfestigkeit und Randedichtigkeit sowie schnelle, präzise und einfache Anwendung sind mit Futurabond DC in einem Adhäsiv vereint. Die Gesamtleistung von Futurabond DC wird somit höchsten Anwender- und Patientenansprüchen gerecht.

Futurabond DC kann bei indirekten Restaurationen mit allen dual- und selbsthärtenden Befestigungssystemen ohne vorherige Polymerisation der Adhäsivschicht verwendet werden. Hierdurch entsteht ein deutlicher Vorteil bei schwer licht-zugänglichen Bereichen.

## Einmal auftragen – sichere Haftung


Die hochfunktionalisierten SiO<sub>2</sub>-Partikel (Ø 20 nm) in Futurabond DC führen zu einer Quervernetzung der

Harzbestandteile des Bondings und verbessern dessen Filmbildungseigenschaften. So kann das Adhäsiv die freigesetzten Kollagenfasern und das mikroretentive Ätzmuster am Schmelz optimal benetzen. Dadurch werden die Vernetzungsdichte und Filmbildungseigenschaften optimiert sowie die Adhäsionsschicht verstärkt.

Ein einmaliges Auftragen des Bondings reicht aus, um einen langfristig stabilen Verbund zwischen Composite und Zahn zu gewährleisten.

## Dualhärtend + Self-etch

- Adhäsive Befestigung indirekter Restaurationen
- Adhäsive Stiftbefestigungen
- Adhäsiver Stumpfaufbau
- Keine Überätzung des Dentins
- Keine Kontamination des Ätzmusters
- Kein zu starkes/geringes Trocknen des Dentins

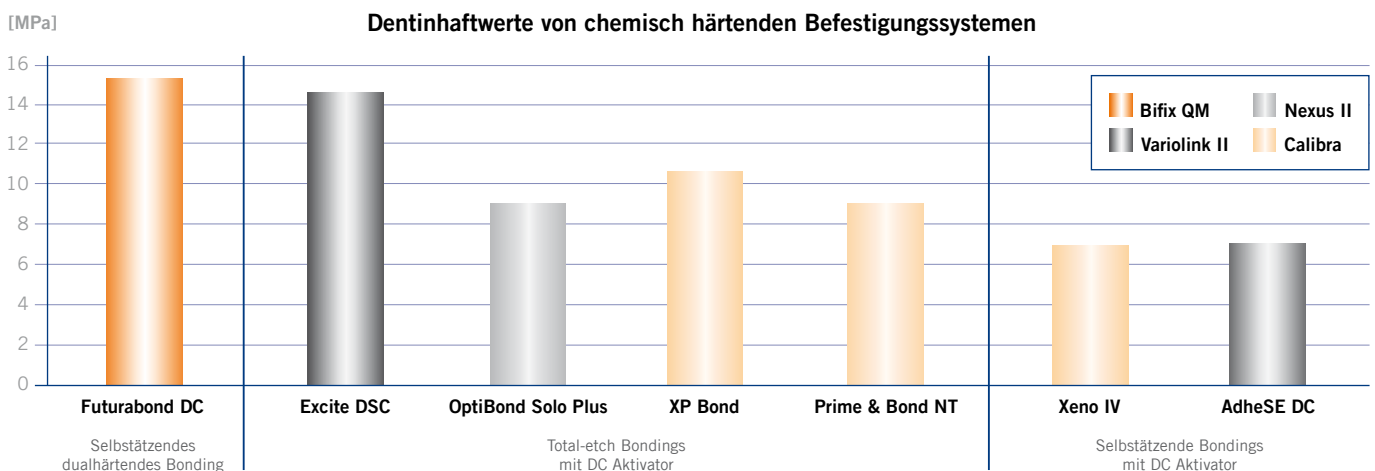

\*Xeno IV, Variolink II, Nexus II, Calibra, AdheSE DC, Excite DSC, Optibond Solo Plus, XP Bond und Prime&Bond NT sind keine eingetragenen Warenzeichen der VOCO GmbH.

# Futurabond® DC

EINFACHE ANWENDUNG IN NUR 35 SEKUNDEN

## Direkte Restauration

**EINFACH DRÜCKEN!  
EINFACH BONDEN!**

20 sec.

5 sec.

10 sec.

3x

## Indirekte Restauration

Cementation

5 sec.

10 sec.

Instructions DC Cement

DC Cement Instructions

VOCO

Posts

# Futurabond® DC

## SIE HABEN DIE WAHL

### Indikation

Direkte selbst- oder dualhärtende Composite Restaurationen und Stumpfaufbauten

Direkte lichthärtende Restaurationen auf Composite- / Compomer- / Ormocer®Basis

Befestigen von Wurzelstiften mit dual- oder selbsthärtenden Compositezementen

Indirekte Restaurationen; bei Verwendung von dualhärtenden / selbsthärtenden Compositezementen zum Befestigen von Inlays, Onlays, Kronen und Brückenversorgungen

### Vorteile der *SingleDose*

- Nur 35 sec. Applikationsdauer
- Ein-Schritt-Aktivierung des Spezialblisters
- Einfach, schnell, hygienisch

### Produktvorteile

- Funktioniert mit allen licht-, dual- und selbsthärtenden Composites
- Ideal für Wurzelstiftzementierung
- Hohe Dentin-Scherhaftung
- Dauerhaft randdicht
- Feuchtigkeitstolerant
- Enthält Fluoride
- Reduziert postoperative Sensibilitäten
- Mit Nanopartikeln verstärkt
- Kein Schütteln erforderlich
- „All-in-One“ Universal Adhäsiv



### Handelsformen

REF 1163 Flasche 2 × 4 ml (Liquid 1 / Liquid 2), Zubehör

REF 1164 *SingleDose* 50 Stk., Zubehör

REF 1165 *SingleDose* 200 Stk., Zubehör

VOCO GmbH  
Anton-Flettner-Straße 1-3  
27472 Cuxhaven  
Deutschland  
  
Tel.: +49 (0) 4721-719-0  
Fax: +49 (0) 4721-719-109  
  
info@voco.de  
www.voco.de

Zu beziehen durch: