



Kleiner Kopf, ganz groß



syneco

Ready for imitation.

Synea Hand- und Winkelstücke: Kleiner Kopf ganz groß

Der kleine Kopf inklusive Penta-Spray sorgt für klare und übersichtliche Verhältnisse – der Zugang zum Behandlungsareal wird wesentlich erleichtert. Damit beweisen Synea Winkelstücke ihren Vorsprung in Sachen Qualität.



WA-99 LT

Mit seiner kleinen Kopfgröße bietet der Schnellläufer WA-99 LT perfekten Zugang zu den Behandlungsstellen. Der bewährte Penta-Spray sorgt dabei für konstante Kühlung und Reinigung. Zudem ist das extrem langlebige Winkelstück ein Vorbild an Zuverlässigkeit und besticht – wie alle Synea Winkelstücke – durch besondere Laufruhe.



Synea WA-56/66/86

Wie auch bei WA-99 haben die Winkelstücke WA-56 1:1, WA-66 2:1 und WA-86 10:1 eine geringe Kopfgröße. Dadurch wird der Zugang zu den molaren Arealen erleichtert und das Sichtfeld zusätzlich erweitert. Ausgefeilte Kugellager-Technologie erhöht zudem die Lebensdauer und Lauffreudigkeit der Instrumente.



Synea HA-43 LT

Mit der Lichtversion des HA-43 leitet W&H auch Licht in ein Handstück. Wie alle Hand- und Winkelstücke überzeugt auch das HA-43 durch ausgereifte Technologie, Monoblock-Design und Langlebigkeit.

Eine Winkelstückreihe: unzählige Vorteile

Der Unterschied ist scheinbar klein. Aber er bewirkt Großes: klare und übersichtliche Verhältnisse, einen leichteren Zugang zum Behandlungsareal und perfekte Kühlung von fünf Seiten. Der kleine Kopf der Synea Winkelstücke – nur einer der vielen Vorteile.

Die Vorteile auf einen Blick

- > Kleinste Kopfgröße
- > Leise und leicht
- > Penta-Spray (5-fach-Spray)
- > Lange Lebensdauer
- > Monobloc-Design
- > Hochwertige Keramikugellager
- > Sprayfilter
- > Hohe Wirtschaftlichkeit
- > Hygienisch optimal




Winkelstück für die Restauration und Prophylaxe: Synea Profin


Das Profin®-Winkelstück wurde für die Anwendung im subgingivalen, interdentalen und approximalen Bereich entwickelt.

Die Vorteile auf einen Blick:

- > Sicheres, effizientes Nachbearbeiten von Überschüssen aus Füllmaterial, Zement und Bonding
Es entfernt Beläge und Mikroorganismen, speziell in Zahntaschen
- > Gründliche Reinigung und Politur von Approximal- und Interdentalräumen sowie subgingivalen Oberflächen
- > Feinpolitur mit Holzspitzen
- > Gestaltung und Anpassung der Papillarbereiche an natürliche Zahnformen
- > Einschleifen konkaver Frontzahn-Führungsflächen
- > Feinbearbeitung von Hohlkehlen und Kavitäten

Das Profin®-Winkelstück wurde für die Anwendung im subgingivalen, interdentalen und approximalen Bereich entwickelt, da hier herkömmliche rotierende Instrumente nicht immer ein zufriedenstellendes Ergebnis bringen. Durch die oszillierende Hubbewegung der Einsätze können natürliche Zahnschubstanz und Restaurationsmaterialien fein, präzise und sicher geschliffen, finiert und poliert werden. Kleiner Kopf, Licht, Einfachspray, Monobloc-Design und neues Griffprofil machen Profin® zu einem unverzichtbaren Partner.

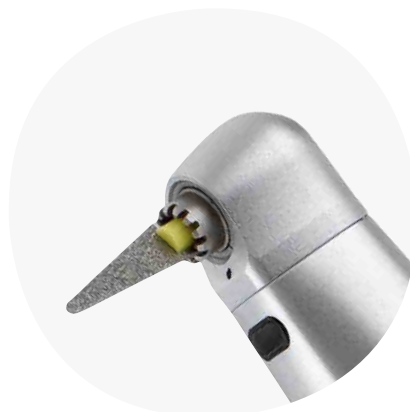

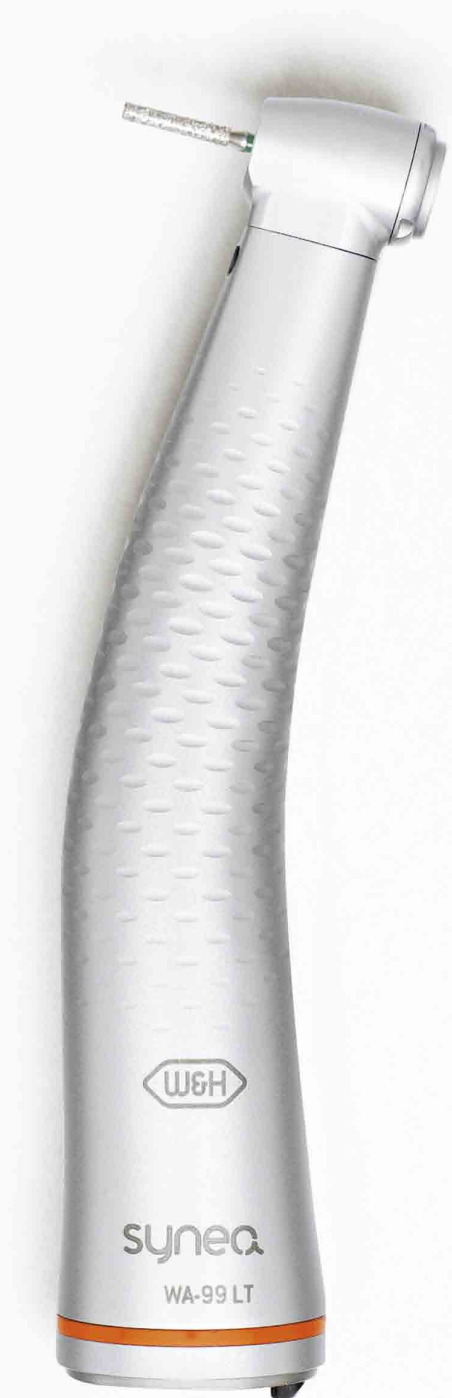

Das Synea Winkelstück WA-99 LT

Technische Daten

Abb. Symbolfotos. Zusatz-Ausstattung und Inhalt der gezeigten Zubehörteile sind nicht im Lieferumfang enthalten.



Typen mit Licht:	WA-99 LT	WA-56 LT	WA-66 LT	WA-86 LT	HA-43 LT	WA-67/1,1 LT
Typen ohne Licht:	WA-99 A	WA-56 A	WA-66 A	WA-86 A	HA-43 A	WA-67/1,1 A
Kopfgröße:	Ø 9,5 mm	Ø 9,5 mm	Ø 9,5 mm	Ø 9,5 mm	–	–
Kopfhöhe mit Bohrer (19 mm):	20,8 mm	20 mm	20 mm	20 mm	–	–
Rotierende Instrumente:	FG-Bohrer	Winkelstückbohrer	Winkelstückbohrer	Winkelstückbohrer	Hand- & Winkelstückbohrer	Hub 1,1 für Dentatus-Tips
Über-/Untersetzung:	1:5	1:1	2:1	10:1	1:1	2:1
Spray:	5-fach (> 50 ml/min)	1-fach (> 50 ml/min)	1-fach (> 50 ml/min)	1-fach (> 50 ml/min)	1-fach (> 50 ml/min)	1-fach (> 50 ml/min)
Beleuchtungsstärke bei Typen mit Licht:	25.000 Lux	25.000 Lux	25.000 Lux	25.000 Lux	25.000 Lux	25.000 Lux
Anwendungsbereiche	<ul style="list-style-type: none"> > Präparation von Kronenstümpfen und Kavitäten > Trepanieren > Resezieren > Finieren > Entfernen von Füllungen und Metallen 	<ul style="list-style-type: none"> > Präparation von Kavitäten > Trepanieren > Resezieren > Separieren > Finieren von Kavitätenrändern und Füllungen 	<ul style="list-style-type: none"> > Exkavieren > Präparation in Pulpanähe > Finieren 	<ul style="list-style-type: none"> > Exkavieren > Präparation in Pulpanähe > Wurzelkanalfüllung > Zementieren 	<ul style="list-style-type: none"> > Präparieren > Separieren > Trepanieren > Resezieren im Frontzahn-bereich > Leichte Technicarbeiten 	<ul style="list-style-type: none"> > Entfernung von Überschüssen > Vorpolieren > Feinpolieren > Aufpolieren im Interdental- und Subgingival-Bereich > Drehzahl max. 20.000 rpm

Hersteller:

W&H Dentalwerk Bürmoos GmbH
Ignaz-Glaser-Straße 53, Postfach 1
5111 Bürmoos, Austria
t + 43 6274 6236-0
f + 43 6274 6236-55
office@wh.com
wh.com

Vertrieb:

W&H Deutschland GmbH
Raiffeisenstraße 4
83410 Laufen, Deutschland
t + 49 8682 8967-0
f + 49 8682 8967-11
office.de@wh.com
wh.com

W&H Austria GmbH
Ignaz-Glaser-Straße 60
5111 Bürmoos, Austria
t + 43 6274 6236-239
f + 43 6274 6236-890
office.at@wh.com
wh.com

W&H CH-AG
Industriepark 9
8610 Uster, Schweiz
t + 41 43 4978484
f + 41 43 4978488
info.ch@wh.com
wh.com