

**PIEZON[®]
POWER
PACK**

SWISS MINI MASTER[®]

EMS[®]


EMS⁺
ELECTRO MEDICAL SYSTEMS

SWISS MINI MASTER™
PIEZON® POWER PACK

SWISS MINI MASTER®

VOM ERFINDER DER METHODE PIEZON®

METHODE PIEZON® →

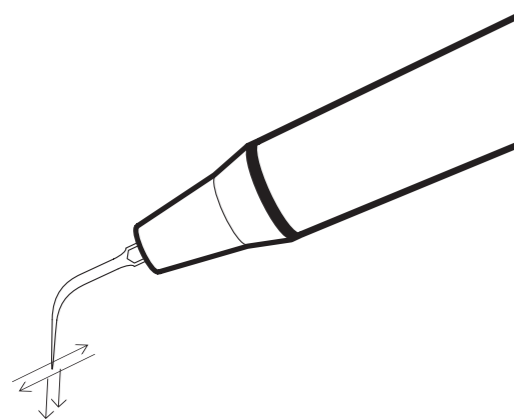

ABSOLUT LINEARE SCHWINGUNGEN VOR UND ZURÜCK SOWIE IN DER VERLÄNGERUNG

> für unvergleichliche Präzision und schonende Arbeitsweise eines jeden Instruments – abgestimmt auf das jeweilige Behandlungsfeld und mit permanenter Feedbackmessung



> hydrodynamische Effekte als wichtige Erfolgskriterien bei Perio- und Endobehandlung
> bakterizide Wirkung und Desintegration von Biofilm, erzielt durch Kavitation und Acoustic Streaming

MULTIFUNKTIONAL →

alle Anwendungen – von Endodontie, Perio, Scaling, Kavitätenpräparation bis konservierende Massnahmen

AUTONOM →

eigene Wasserversorgung mit 350-ml- und 500-ml-Flaschen, Steckdose genügt

ERGONOMISCH →

Bedienungselemente zur Leistungseinstellung, permanente LED-Anzeige, praktische Schlauch-Steckkupplung mit Wasserregulierung, abnehmbare Handstücke, Instrumente mit CombiTorques in Steribox aus Stahl, 2-stufiges Fusspedal – Stufe 1 zum Spülen und Voreinstellen der Intensität, Stufe 2 zum Auslösen des Ultraschalls

PATIENTENFREUNDLICH →

sanfteste Elektronik mit Microcontroller



Swiss Instruments A, P, PS

Steribox

KOMPLETT →

inkl. Handstück und 3 Swiss Instruments auf CombiTorques in der Steribox aus Stahl, Schlauch, 2 Flaschen, Trafo und Fusspedal

**MULTI-
FUNKTIONAL
AUTONOM
ORIGINAL
PIEZON®**



WWW.EMS-SWISSQUALITY.COM

EMS SA
Ch. de la Vuarpillière 31
CH-1260 Nyon

Tel. +41 22 99 44 700
Fax +41 22 99 44 701
welcome@ems-ch.com

EMS
ELECTRO MEDICAL SYSTEMS-
VERTRIEBS GMBH
Schatzbogen 86
D-81829 München

Tel. +49 89 42 71 610
Fax +49 89 42 71 61 60
info@ems-dent.de