


VDW.GOLD

Multifunktionaler Endomotor
mit integriertem Apexlocator

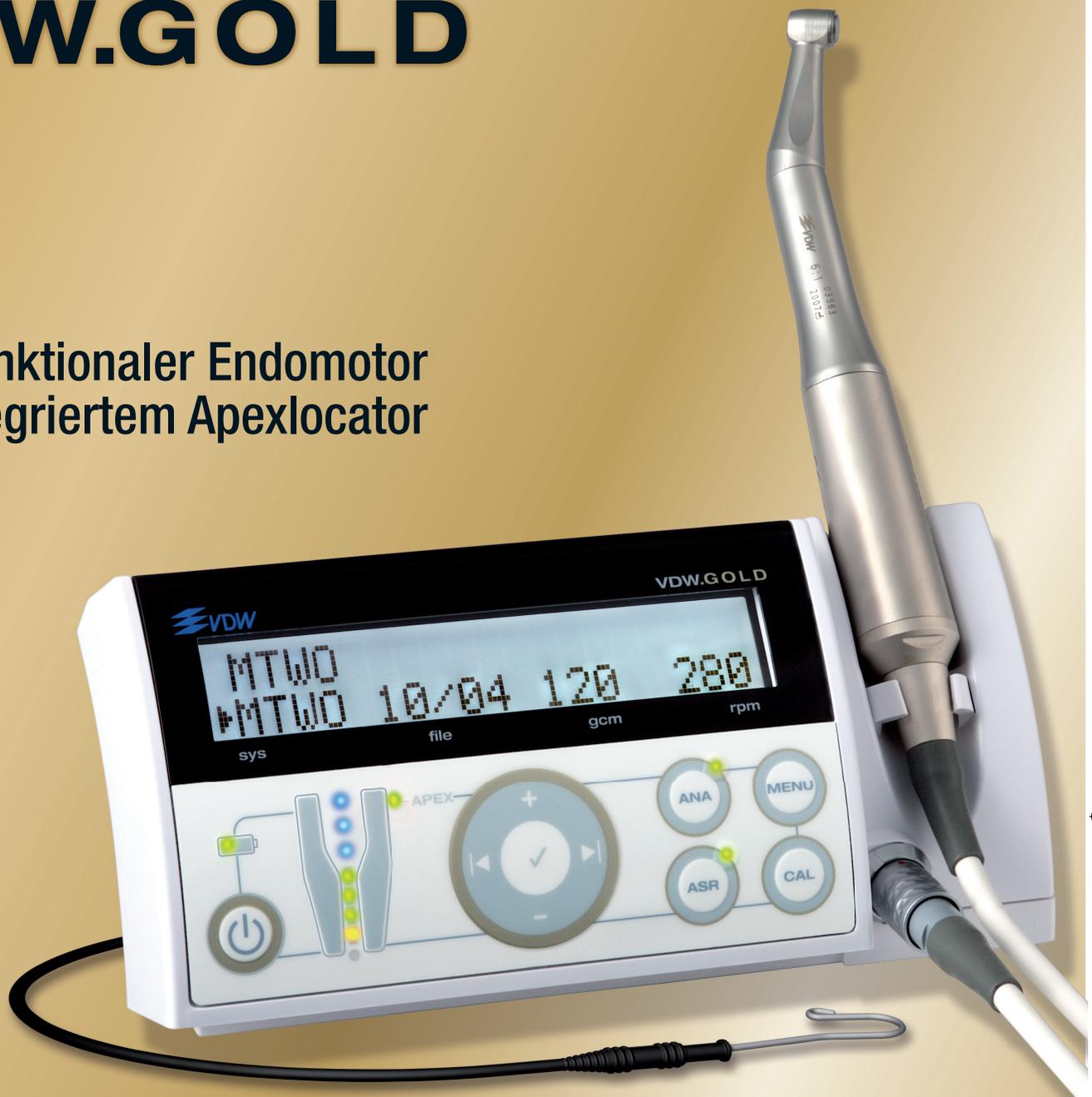

Vielseitig in Funktion und Anwendungsbereich

- Freie Wahl des Feilensystems
- Vorprogrammierte Drehmoment- und Drehzahlwerte für alle wichtigen NiTi-Systeme
- Größte Flexibilität durch einfaches Speichern individueller Drehmoment-/Drehzahlwerte
- Intelligente Steuerung mit automatischen Sicherheitsfunktionen
- Großer Drehzahlbereich bis 2.000 UpM erlaubt den Einsatz schnelldrehender NiTi-Systeme
- Bequemer Akkubetrieb, Behandlung auch während des Ladens möglich



Endo Einfach Erfolgreich®



→ Funktionelles Bedienfeld

- ANA** Sicherheitstaste für schwierige Anatomie
- ASR** Automatischer STOP und Rückwärtslauf bei hoher Belastung
- MENU** Einfache, durchdachte Menüstruktur
- CAL** Kalibrierfunktion bei Winkelstückwechsel



→ Integrierter Präzisions-Apexlocator

- Kombinierte Längenbestimmung während der Aufbereitung oder separater Einsatz des Apexlocators
- Zuschaltbarer Auto-STOP bei Erreichen des Apex
- Kontinuierliche Überwachung der Feilenposition auf der LED Anzeige
- Zuverlässige Längenbestimmung ohne Röntgenstrahlung



→ Hochwertiges Winkelstück mit integriertem Messkontakt

- Kurzkopf für gute Sicht und Handlichkeit
- Ohne störenden Kontaktbügel
- Für schnellen Feilenwechsel



Lieferprogramm

Ref. 1103 VDW. GOLD
inklusive Winkelstück und Fußschalter

Ref. 1079 Zusätzliches Kurzkopf-Winkelstück 6:1

Ref. 1105 VDW. GOLD (Ref. 1103) + Mtwo® StarterKit

Inhalt Mtwo® StarterKit:

Je 2 Mtwo® ISO 10/04, 15/05, 20/06, 25/06

Je 1 Mtwo® ISO 30/05, 35/04, 40/04, 25/07

1 Mtwo® Instrumentenbox

3 Plastik Übungsblöcke

2 x 3ml FileCare® EDTA

Anwender CD-ROM und Broschüre

Ref. 1104 VDW. GOLD (Ref. 1103) + FlexMaster® StarterKit

Inhalt FlexMaster® StarterKit:

Je 1 FlexMaster® BasicKit 21 und 25mm

1 FlexMaster® System Box

3 Plastik Übungsblöcke

2 x 3ml FileCare® EDTA

Anwender-Broschüre

VW000245 Rev.0/10.07



VDW GmbH • Postfach 830954 • 81709 München
Tel 089 627 34-0 • Fax 089 627 34-190
info@vdw-dental.com • www.vdw-dental.com



Endo Einfach Erfolgreich®